

PROVOX[®]

Catalog Produse 2019



Atos Atos Medical
Your voice

Atos Medical - Cine suntem

Noi, cei de la Atos Medical suntem angajați să dăm o voce persoanelor care respiră printr-o stomă, cu soluții de proiectare și tehnologii construite în decenii de experiență și o înțelegere profundă a utilizatorilor noștri.

Odata cu lansarea

fonatorii

De la introducerea primei proteze de voce Provox în 1990, Atos Medical a devenit lider mondial în îngrijirea laringectomiei.

Angajamentul nostru și specializarea dedicată în acest domeniu ne-au permis să obținem o înțelegere profundă a nevoilor clienților noștri. Această înțelegere ne conduce procesul de inovare și ne mândrim că aducem continuu soluții inovative utilizatorilor noștri.

De-a lungul timpului

În timpul anilor am venit în întâmpinarea nevoilor a în jur de 100.000 de persoane cu laringectomie în peste 70 de țări. Portofoliul nostru complet de Îngrijire a Laringectomiei include o gamă completă de dispozitive de reabilitare de voce și pulmonare Provox. Această gamă largă de produse Provox de înaltă calitate permite o combinație personalizată de soluții pentru fiecare utilizator.

Atos Medical înțelege că a fi lider în acest domeniu înseamnă mai mult decât dezvoltarea produselor. Sprijinirea cercetărilor clinice și educarea atât a profesioniștilor cât și a utilizatorilor este parte integrantă din activitatea noastră.

Produsele noastre apar în 150 de publicații analizate de colegi. Sprijinim și efectuăm sute de conferințe și programe educaționale în fiecare an.

Suntem mândri de istoria și de realizările noastre și continuăm și fim încântați să învățăm de la utilizatorii noștri; oferindu-le cele mai bune produse, servicii și educație în Îngrijirea Laringectomiei.

Brevete și mărci comerciale:

Provox®, Provox® ActiValve®, Provox® FreeHands HME®, Provox® Luna®, Provox® XtraBase®, Provox® TrachPhone®, TruTone®, TruTone EMOTE® și SolaTone® sunt mărci înregistrate deținute Atos Medical AB, Suedia.

Provox® Vega™, Provox® Vega™ XtraSeal™, Provox® NiD™, Provox® XtraMoist™ and XtraFlow™, Provox® Micron HME™, Provox® HME Cap™, Provox® XtraFlange™, Provox® ShowerAid™, Provox® LaryTube™, Provox® LaryClip™ and Provox® LaryButton™, Provox® Flexi-Derm™, Provox® OptiDerm™, Provox® FreeHands FlexiVoice™, Provox® FreeHands Support™, Provox® StabiliBase™ și SolaTone Plus™ sunt mărci comerciale ale Atos Medical AB, Suedia.

Pentru informații despre drepturi de protecție (ex. brevete), vă rugăm consultați pagina noastră web www.atosmedical.com/patents.

În acest catalog veți găsi produse care vă oferă
capacitatea de a vorbi, respira bine și a avea grijă de piele.

Cuprins

- 4. Vorbire
- 11. Respirație
- 18. Hands-free
- 22. Îngrijire
- 26. Ilustrații laringectomie
- 27. Contact

Vorbire



Provox® Vega™

fonatorie

O proteză de voce creată pentru o bună calitate a vocii, efort scăzut la vorbire, întreținere ușoară a dispozitivului și confort.

- Voce mai puțin încordată
- Mai ușor de înțeles
- Mai puțin efort de vorbire
- O mai bună calitate a vocii



fonatorie

Proteza de voce Provox Vega vine cu un Sistem de Inserție ce vă oferă mai mult control și o mai mare flexibilitate.

- Se adaptează la anatomia pacientului și la metoda preferată de inserție a clinicianului
- Creează o cută perfectă a flânsei esofagiene
- Intuitiv și ușor de utilizat



Provox Vega 17Fr	Mărime	Nr. ref.	Provox Vega 20Fr	Mărime	Nr. ref.	Provox Vega 22.5Fr	Mărime	Nr. ref.
Provox Vega 17Fr	4 mm	8270	Provox Vega 20Fr	4 mm	8276	Provox Vega 22.5Fr	4 mm	8282
Provox Vega 17Fr	6 mm	8271	Provox Vega 20Fr	6 mm	8277	Provox Vega 22.5Fr	6 mm	8283
Provox Vega 17Fr	8 mm	8272	Provox Vega 20Fr	8 mm	8278	Provox Vega 22.5Fr	8 mm	8284
Provox Vega 17Fr	10 mm	8273	Provox Vega 20Fr	10 mm	8279	Provox Vega 22.5Fr	10 mm	8285
Provox Vega 17Fr	12.5 mm	8274	Provox Vega 20Fr	12.5 mm	8280	Provox Vega 22.5Fr	12.5 mm	8286
Provox Vega 17Fr	15 mm	8275	Provox Vega 20Fr	15 mm	8281	Provox Vega 22.5Fr	15 mm	8287

Steril, de unică folosință

Include: 1 proteză de voce Provox Vega cu Sistem de Inserție (steril) și 1 Perie Provox (non-sterilă).

fonatorie

Provox Capsule	Nr. ref.
Provox Capsule 17Fr	7795
Provox Capsule 20Fr	7796
Provox Capsule 22.5Fr	7797



Non-steril, de unică folosință

Provox® Vega™ XtraSeal™

O soluție pentru a ține sub control scurgerile. **pe langa/ in jurul protezei fonatorii**

- Flanșa esofagiană lărgită este subțire și flexibilă, ceea ce îi permite să se adapteze țesutului din jurul puncției TE
- Utilizatorul poate continua să vorbească, să mănânce și să bea în timp ce scurgerea este ținută sub control.



Provox Vega XtraSeal	Mărime	Nr. ref.	Provox Vega XtraSeal	Mărime	Nr. ref.	Provox Vega XtraSeal	Mărime	Nr. ref.
Provox Vega XtraSeal 17Fr	4 mm	8288	Provox Vega XtraSeal 20Fr	4 mm	8294	Provox Vega XtraSeal 22.5Fr	4 mm	8300
Provox Vega XtraSeal 17Fr	6 mm	8289	Provox Vega XtraSeal 20Fr	6 mm	8295	Provox Vega XtraSeal 22.5Fr	6 mm	8301
Provox Vega XtraSeal 17Fr	8 mm	8290	Provox Vega XtraSeal 20Fr	8 mm	8296	Provox Vega XtraSeal 22.5Fr	8 mm	8302
Provox Vega XtraSeal 17Fr	10 mm	8291	Provox Vega XtraSeal 20Fr	10 mm	8297	Provox Vega XtraSeal 22.5Fr	10 mm	8303
Provox Vega XtraSeal 17Fr	12.5 mm	8292	Provox Vega XtraSeal 20Fr	12.5 mm	8298	Provox Vega XtraSeal 22.5Fr	12.5 mm	8304
Provox Vega XtraSeal 17Fr	15 mm	8293	Provox Vega XtraSeal 20Fr	15 mm	8299	Provox Vega XtraSeal 22.5Fr	15 mm	8305

Steril, de unică folosință

Include: 1 proteză de voce Provox Vega cu Sistem de Inserție (steril) și 1 Perie Provox (non-sterilă).

Notă: Axul Provox XtraSeal este cu circa 1 mm mai scurt decât mărimea indicată datorită flanșei esofagiene lărgite.

Provox® ActiValve®

fonatorie
Proteza de voce cu durată de viață prelungită a dispozitivului

- Durată prelungită de viață – reduce nevoia înlocuirilor frecvente la majoritatea pacienților care experimentează o durată scurtă de viață a dispozitivului
- Disponibil în trei variante de putere: Light (Ușoară), Strong (Puternică) și XtraStrong (Extra Puternică)



Provox ActiValve	Mărime	Nr. ref.	Provox ActiValve	Mărime	Nr. ref.	Provox ActiValve	Mărime	Nr. ref.
Provox ActiValve Light	4.5 mm	7150	Provox ActiValve Strong	4.5 mm	7160	Provox ActiValve XtraStrong	4.5 mm	7165
Provox ActiValve Light	6 mm	7151	Provox ActiValve Strong	6 mm	7161	Provox ActiValve XtraStrong	6 mm	7166
Provox ActiValve Light	8 mm	7152	Provox ActiValve Strong	8 mm	7162	Provox ActiValve XtraStrong	8 mm	7167
Provox ActiValve Light	10 mm	7153	Provox ActiValve Strong	10 mm	7163	Provox ActiValve XtraStrong	10 mm	7168
Provox ActiValve Light	12.5 mm	7154	Provox ActiValve Strong	12.5 mm	7164	Provox ActiValve XtraStrong	12.5 mm	7169
						Lubrifiant Provox ActiValve (înlocuitor)		7149

Non-steril, de unică folosință

Include: 1 proteză de voce Provox ActiValve, 1 instrument de inserție de unică folosință, 2 Perii Provox, 1 Lubrifiant Provox ActiValve, 1 Mufă Provox, 2 Carduri de Utilizator, 1 Card de Urgență

Set Punctie Provox® Vega™

Un set chirurgical de unică folosință pentru plasarea primară și secundară a Provox Vega

- Set chirurgical multifuncțional
- Creează o puncție rotundă, lăsând țesutul din jur intact
- Este pre-încărcat cu o proteză de voce Provox Vega
- De unică folosință și steril
- Permite o procedură rapidă, pregătirea minimă și asamblarea sunt necesare cu o pregătire și asamblare minimă



Provox Vega Puncture Set	Mărime	Nr. ref.
Provox Vega Puncture Set 17 Fr	8 mm	8140
Provox Vega Puncture Set 17 Fr	10 mm	8141
Provox Vega Puncture Set 17 Fr	12.5 mm	8142
Provox Vega Puncture Set 17 Fr	15 mm	8143
Provox Vega Puncture Set 20 Fr	8 mm	8144

Provox Vega Puncture Set	Mărime	Nr. ref.
Provox Vega Puncture Set 20 Fr	10 mm	8145
Provox Vega Puncture Set 20 Fr	12.5 mm	8146
Provox Vega Puncture Set 22.5 Fr	8mm	8147
Provox Vega Puncture Set 22.5 Fr	10 mm	8148
Provox Vega Puncture Set 22.5 Fr	12.5 mm	8149

Steril, de unică folosință.

Include: 1 Protector Faringe (realizat din termoplastice transparente), 1 Ac de Puncție (realizat din oțel inoxidabil chirurgical), 1 fir conductor (realizat din fluoroplast colorat prealabil), 1 dilator puncție cu o proteză de fonatorie voce pre-încărcată Provox Vega și 1 Perie Provox.

Perie Provox®

Pentru curățarea protezei de voce. fonatorii

- Curățare ușoară și eficientă.
- Mânerul poate fi îndoit pentru adaptare individuală
- Poate fi folosit pentru a introduce Mufa Provox și Mufa Provox Vega

Provox Brush	Cantitate	Mărime	Nr. ref.
Provox Brush	6 buc	4.5-10 mm	7204
Provox Brush XL	6 buc	12-18 mm	7225

Non-steril, utilizare pentru un singur pacient.
Reutilizabil. Pentru proteze de voce cu mărime 12.5 și 15 mm folosiți Peria Provox XL.



Pompita

Dispozitiv de clătire Provox®

Pentru clătire după periery

- Poate fi folosit cu aer sau apă de băut
- Poate fi îndoit pentru ajustare individuală

Pompita

Dispozitiv de clătire Provox	Cantitate	Nr. ref.
Dispozitiv de clătire Provox	1 buc	8109

Non-steril, utilizare pentru un singur pacient.
Reutilizabil.



Mufă Provox® & Mufă Provox® Vega™

Prim-ajutor pentru a opri temporar scurgerile prin proteza de voce fonatorie de voce.

Mufă Provox & Mufă Provox Vega	Cantitate	Nr. ref.
Mufă Provox	1 buc	7205
Mufă Provox Vega, 17 Fr	1 buc	8119
Mufă Provox Vega, 20 Fr	1 buc	8129
Mufă Provox Vega, 22.5 Fr	1 buc	8139

Non-steril, utilizare pentru un singur pacient.
Reutilizabil. Include Peria Provox.

Notă: Mufa Provox Vega se potrivește cu protezele Provox Vega și Mufa Provox cu Provox ActiValve



Provox® XtraFlange™

O soluție rapidă pentru a ține sub control scurgerile pe langa/ in jurul protezei fonatorii

Provox XtraFlange	Cantitate	Nr. Ref.
Provox XtraFlange 22.5 Fr	1 buc	7275
Provox XtraFlange 20 Fr	1 buc	7276
Provox XtraFlange 17 Fr	1 buc	7277

Steril, de unică folosință



Cablu de ghidaj Provox®

Cablul de ghidaj Provox permite inserția retrogradă a tuturor protezelor interne Provox. Vârful conține o fantă de reținere ce ține cureaua de siguranță a protezei.

Cablu de ghidaj Provox	Cantitate	Ref. nr.
Cablu de ghidaj Provox	1 buc	7215

Steril, de unică folosință.



Unitate de măsurare Provox®

Unitatea de măsurare Provox este folosită pentru a determina lungimea (aferentă dimensiunii maxime) punctiilor TE. Mărimea corectă a protezei (1-2 mm mai lungă decât punctia) este importantă pentru a minimiza riscul de complicații.

Unitate de măsurare Provox	Cantitate	Ref. nr.
Unitate de măsurare Provox	1 buc	7270
Flanșe Unitate de măsurare Provox	5 buc	7271

Unitate de măsurare Provox: non-sterilă, reutilizabilă, sterilizabilă.
Flanșe unitate de măsurare Provox: non sterile, de unică folosință



Dilatator Provox®

Dilatatorul Provox este folosit pentru a mări diametrul punctiei TE sau blocării temporare a unei punctii TE, indiferent de tipul și diametrul protezei de voce folosite. Mărimea poate fi crescută de la 15 Fr la 24 Fr cu un dispozitiv (pașii: 18, 20, 22, 24 Fr).

Dilatator Provox	Cantitate	Nr. Ref.
Dilatator Provox	1 buc	7211
Dilatator Provox 17	1 buc	7122
Dilatator Provox 20	1 buc	7123

Non-steril, reutilizabil, sterilizabil.



Laringofonul

Un electrolaring este deseori utilizat imediat după operație, înainte de a vă vindeca suficient pentru a vorbi cu o proteză ~~de voce~~ ^{fonatorie}. Mulți aleg să folosească un electrolaring ca rezervă, sau ca mijloc temporar de comunicare.

Provox® TruTone EMOTE®

Asistență de înaltă calitate pentru exprimare mai naturală.

- Permite variația tonului vocii pentru a permite ca emoțiile dumneavoastră să fie auzite
- Permite schimbări ale volumului vocii, de la șoptă la ton ridicat
- Simplu și ușor de utilizat
- Inteligibilitate ridicată
- Model confortabil, ergonomic și fluid
- Durată de viață a bateriei de până la o lună și încărcare USB

Provox TruTone EMOTE	Cantitate	Nr. Ref.
Provox TruTone EMOTE	1 buc	7439

Include: Capac de sunet extra-precis. Baterie reîncărcabilă, Adaptor oral, Tuburi orale, Încărcător USB.



Provox® SolaTone Plus™

Ușor și simplu de utilizat.

- Simplu de folosit cu ajustări externe de ton și volum
- ~~Calitate a sunetului, a intervalului de voce și a construcției~~ ^{Sunet de calitate, gama largă de tonalitate a vocii}
- Include baterii AA reîncărcabile
- Încărcare USB
- Compact și ușor

Provox SolaTone Plus	Cantitate	Nr. Ref.
Provox SolaTone Plus	1 buc	7438

Include: 2 baterii reîncărcabile, Adaptor oral, Tuburi orale, Încărcător USB



Respirație



Provox® XtraMoist™

Acest HME face aerul mai umed. Folosiți-l ziua, când ~~luați lucrurile mai încet~~ ^{va relaxați}.

- Umidificare crescută
- Respirație confortabilă
- Reduce tusea și producția de mucus
- Ocluzie ușoară a stomei pentru exprimare
- Model profil scurt



Provox XtraHME	Cantitate	Nr. Ref.
Provox XtraMoist HME	30 buc	7290

Non-steril, de unică folosință

Provox® XtraFlow™

Acest HME vă ușurează respirația. Folosiți-l în timpul zilei, când sunteți activ fizic.

- Rezistență scăzută la respirație
- Reduce tusea și producția de mucus
- Ocluzie ușoară a stomei pentru exprimare
- Model profil scurt



Provox XtraHME	Cantitate	Nr. Ref.
Provox XtraFlow HME	30 buc	7291

Non-steril, de unică folosință

Provox® Luna®

O soluție pentru noapte, ~~pentru a~~ ^{care} vă ajuta să dormiți confortabil, calmează pielea și îmbunătățește sănătatea plămânilor.

- Moale și neted pentru confort în timpul nopții
- Adeziv realizat din hidrogel pentru a calma și răci pielea
- Umidificare excelentă comparativ cu alte HME-uri*
- Rezistență scăzută la respirație pentru respirație ușoară pe timp de noapte
- Deschideri laterale pentru a împiedica ocluzia în timpul somnului

* Date în dosar

Provox Luna	Cantitate	Nr. Ref.
Provox Luna HME	30 buc	8013
Provox Luna Adeziv	15 buc	8014

Non-steril, pentru utilizare doar pe timp de noapte



Provox® Micron HME™

Nu doar un HME, ci și un filtru eficient pentru bacterii, virusuri și praf

- Un filtru bacterian și viral foarte eficient ($\geq 99\%$)
- Reduce tusea și producția de mucus

Vă rugăm luați aminte că capacitatea de filtrare Provox Micron poate varia în funcție de mărimea, forma și viteza particulelor din aer.



Provox Micron HME	Cantitate	Nr. Ref.
Provox MicronHME	5 buc	7247
Provox MicronHME	30 buc	7248

Non-steril, de unică folosire.

Provox® StabiliBase™

Oferă sigilare superioară și suport pentru stoma atunci când vorbiți hands-free.

- Pentru a vorbi hands-free
- Pentru a vorbi mult folosind ocluzia degetului
- Se lipește bine de piele
- Pentru o stomă adâncă

Provox StabiliBase	Cantitate	Nr. Ref.
Provox StabiliBase	15 buc	7289
Provox StabiliBase OptiDerm	15 buc	7318

Non-steril, de unică folosință.



Provox® XtraBase®

Pentru a vorbi folosind ocluzia degetului sau hands-free.

- Pentru a vorbi folosind ocluzia degetului sau hands-free
- Pentru o stomă plată sau nu foarte adâncă
- Se lipește bine de piele

Provox XtraBase	Cantitate	Nr. Ref.
Provox XtraBase	20 buc	7265

Non-steril, de unică folosință.



Provox® FlexiDerm™

Oferă o bună sigilare în jurul stomei în timpul zilei.

- Pentru a vorbi folosind ocluzia
- Se lipește bine de piele
- Pentru o stomă plată

Provox FlexiDerm	Cantitate	Nr. Ref.
Provox FlexiDerm Round	20 buc	7253
Provox FlexiDerm Oval	20 buc	7254
Provox FlexiDerm Plus	20 buc	7331

Non-steril, de unică folosință.



Provox® OptiDerm™

Un adeziv pentru ziua ^{dacă} în care pielea este sensibilă, inflamată sau iritată.

- Pentru piele sensibilă
- Pentru piele inflamată sau iritată
- Folosiți după operație
- Folosiți după radioterapie

Provox OptiDerm	Cantitate	Nr. Ref.
Provox OptiDerm Round	20 buc	7255
Provox OptiDerm Oval	20 buc	7256
Provox OptiDerm Plus	20 buc	7332

Non-steril, de unică folosință.



Provox® LaryButton™

Pentru a menține deschiderea stomei.

Provox LaryButton	OD	L	Nr. Ref.
Provox LaryButton 12/8	12	8	7671
Provox LaryButton 14/8	14	8	7672
Provox LaryButton 16/8	16	8	7673
Provox LaryButton 18/8	18	8	7674

Provox LaryButton	OD	L	Nr. Ref.
Provox LaryButton 12/18	12	18	7685
Provox LaryButton 14/18	14	18	7686
Provox LaryButton 16/18	16	18	7687
Provox LaryButton 18/18	18	18	7688

Non-steril, utilizare pentru un singur pacient. Reutilizabil.



Provox® LaryTube™

Pentru a menține deschiderea tracheostomei. Disponibilă în variantă Standard, Fenestrată (a se prinde cu Provox LaryClips sau Provox TubeHolder) și cu Inel (a se prinde cu adeziv Provox).

ID=diametru intern
OD=diametru extern
L=lungime (în mm)

Provox® LaryTube™ Standard

Standard	ID	OD	L	Nr. Ref.	Standard	ID	OD	L	Nr. Ref.
Provox LaryTube 8/27	9.5	12.0	27	7601	Provox LaryTube 10/27	12.0	15.0	27	7609
Provox LaryTube 8/36	9.5	12.0	36	7602	Provox LaryTube 10/36	12.0	15.0	36	7610
Provox LaryTube 8/55	9.5	12.0	55	7603	Provox LaryTube 10/55	12.0	15.0	55	7611
Provox LaryTube 9/27	10.5	13.5	27	7605	Provox LaryTube 12/27	13.5	17.0	27	7613
Provox LaryTube 9/36	10.5	13.5	36	7606	Provox LaryTube 12/36	13.5	17.0	36	7614
Provox LaryTube 9/55	10.5	13.5	55	7607	Provox LaryTube 12/55	13.5	17.0	55	7615

Non-steril, a se utiliza de către un singur pacient. Reutilizabil.
Include: 5 Provox XtraFlow HME (7291)



Provox® LaryTube™ Fenestrat

Fenestrat	ID	OD	L	Nr. Ref.	Fenestrat	ID	OD	L	Nr. Ref.
Provox LaryTube 8/36	9.5	12.0	36	7637	Provox LaryTube 10/36	12.0	15.0	36	7643
Provox LaryTube 8/55	9.5	12.0	55	7638	Provox LaryTube 10/55	12.0	15.0	55	7644
Provox LaryTube 9/36	10.5	13.5	36	7640	Provox LaryTube 12/36	13.5	17.0	36	7646
Provox LaryTube 9/55	10.5	13.5	55	7641	Provox LaryTube 12/55	13.5	17.0	55	7647

Non-steril, a se utiliza de către un singur pacient. Reutilizabil. Include: 5 Provox XtraFlow HME (7291) și 1 Perie Provox (7204)



Provox® LaryTube™ cu Inel

Cu inel	ID	OD	L	Nr. Ref.	Cu inel	ID	OD	L	Nr. Ref.
Provox LaryTube 8/36	9.5	12.0	36	7624	Provox LaryTube 10/36	12.0	15.0	36	7628
Provox LaryTube 8/55	9.5	12.0	55	7625	Provox LaryTube 10/55	12.0	15.0	55	7629
Provox LaryTube 9/36	10.5	13.5	36	7626	Provox LaryTube 12/36	13.5	17.0	36	7630
Provox LaryTube 9/55	10.5	13.5	55	7627	Provox LaryTube 12/55	13.5	17.0	55	7631

Non-steril, a se utiliza de către un singur pacient. Reutilizabil. Include: 5 Provox XtraFlow HME (7291)



Provox® TubeHolder

Provox TubeHolder a fost dezvoltat exclusiv pentru a fi utilizat cu Provox LaryTube și Provox LaryButton. Este potrivit pentru utilizatorii cu piele sensibilă în jurul tracheostomei.

Provox TubeHolder	Cantitate	Nr. Ref.
Provox TubeHolder	1 buc	7668

Non-steril, de unică folosință



Provox® LaryClip™

Provox LaryClip este o alternativă la Provox TubeHolder.

Provox LaryClip	Ref.no
1 set: 8 buc LaryClip, 40 buc LaryClip Base	7669

Non-steril, de unică folosință



Capac Provox® HME

Capacul Provox HME este folosit cu HME-uri FreeHands. Capacul poate fi astupat manual pentru vorbire.

Capac Provox HME	Cantitate	Nr. Ref.
Capac mat titan Provox HME	1 buc	7730

Non-steril, a se utiliza pentru un singur pacient.
Reutilizabil.




Tampon Provox®

Tampon de înaltă calitate pentru curățare ușoară și igienică a canulei traheale

Tampon Provox	Cantitate	Mărime	Nr. Ref.
Tampon Provox Mic	50 buc	5 mm	8250
Tampon Provox Mediu	50 buc	8 mm	8251
Tampon Provox Mare	50 buc	11 mm	8252
Tampon Provox Xtra Mare	50 buc	13 mm	8258

Non-steril, de unică folosință.
(Tampoane de unică folosință în 5 pachete de 10)

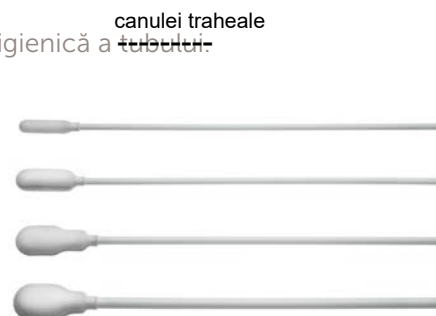

Perie Tubulară Provox®

Perie Tubulară Provox este folosită pentru a curăța Provox LaryTube și Provox LaryButton.

Perie Tubulară Provox	Cantitate	Mărime	Nr. Ref.
Perie Tubulară Provox	6 buc	8 mm	7660
Perie Tubulară Provox	6 buc	12 mm	7661

Non-steril, a se utiliza de către un singur pacient.
Reutilizabil.



Adaptor Placă de Bază Provox® BasePlate

Provox BasePlate

Adaptorul Plăcii de Bază Provox face posibilă atașarea unui dispozitiv, ex. un HME, cu un conector standard ISO 15 mm la un accesoriu Provox.

Provox BasePlate		
Adaptor placă de bază Provox	Cantitate	Nr. Ref.
Adaptor Plăcii de Bază Provox	1 buc	7263

Non-steril, a se folosi de un singur pacient. Reutilizabil.



Adaptor Casetă Provox® HME

Adaptorul Casetă Provox HME permite utilizarea unui filtru Provox HME pentru orice canula traheală sau tub de traheostomie cu un conector ISO 15 mm.

Adaptor casetă Provox HME	Cantitate	Nr. Ref.
Adaptor casetă Provox HME	1 buc	7246

Non-steril, a se folosi de un singur pacient. Reutilizabil.



Instrument de Fenestrare Provox®

Instrumentul de Fenestrare Provox este folosit pentru a efectua mici fenestrații în Provox LaryTube.

Instrument de Fenestrare Provox	Cantitate	Nr. Ref.
Instrument de Fenestrare Provox	1 buc	7654

Non-steril. Reutilizabil, sterilizabil.



Set de dimensionare Provox® LaryButton™ și Set de dimensionare Provox® LaryTube™

Pentru a permite selecția și dimensionarea corespunzătoare, Setul de dimensionare Provox LaryButton și Setul de dimensionare Provox LaryTube conține tuburi sterilizabile și reutilizabile pentru ajustare individuală. Produsele pot fi fixate cu Provox LaryClip și Provox TubeHolder.

Set de dimensionare Provox LaryButton	Nr. ref
Set de dimensionare Provox LaryButton	7690

Non-steril, reutilizabil, sterilizabil (Butoane de dimensionare și cutie internă). Tava externă poate fi curățată în spălătorul de instrumente.

Set de dimensionare Provox LaryTube	Nr. ref
Set de dimensionare Provox LaryTube	7648

Non-steril, reutilizabil, sterilizabil (Canule traheale de dimensionare și cutie internă). Tava externă poate fi curățată în spălătorul de instrumente.



Hands-free



Provox® FreeHands FlexiVoice™

Oferă libertatea de a vorbi hands-free.

Membrana disponibilă în patru variante:

Ușoară, Medie, Puternică, Extra-Puternică.

- Vorbiți hands-free sau ocluzând cu degetul când doriți
- Folosiți diferite membrane pentru situații diferite
- Lipsă activității fizice intense
- Instalare rapidă
- Reduce producția de mucus și tusea



Provox FreeHands FlexiVoice	Nr. Ref.	Provox FreeHands FlexiVoice	Nr. Ref.
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus: 1 ușor, 1 mediu, 1 puternic, 2 Arcuri, 1 Accesoriu de eliminare, 30 Casete HME*	7757	Provox FreeHands FlexiVoice Light: 1 ușor, 1 arc, 1 Accesoriu de eliminare	8161
Provox FreeHands, FlexiVoice Set: 1 ușor, 1 mediu, 1 puternic, 2 Arcuri, 1 Accesoriu de eliminare	7760	Provox FreeHands, FlexiVoice Medium: 1 mediu, 1 arc, 1 Set de eliminare	8162
		Provox FreeHands, FlexiVoice Strong: 1 puternic, 1 arc, 1 accesoriu de eliminare	8163
		Provox FreeHands, FlexiVoice XtraStrong: 1 Extra-puternic, 1 Arc, 1 Accesoriu de eliminare.	8166

*Non-steril, de unică folosință

Non-steril, a se utiliza de către un singur pacient. Reutilizabil.

Provox® FreeHands Support™

Pentru a reduce mișcările stomei și a îmbunătăți calitatea vocii când vorbiți hands-free cu Provox FreeHands FlexiVoice

Suport FreeHands	Provox	Cantitate	Nr. Ref.
Provox FreeHands Support Set de bază: 1 Suport Plat*, 1 Suport Mediu*, 1 Suport Adânc*		1 buc	8020
Provox FreeHands Suport Plat*		1 buc	8021
Provox FreeHands Suport Mediu*		1 buc	8022
Provox FreeHands Suport Adânc*		1 buc	8023
Provox FreeHands Suport Adeziv**		15 buc	8024

*Non-steril, a se utiliza pentru un singur pacient. Reutilizabil.

**Non-steril, a se utiliza pentru un singur pacient.



Provox® FreeHands HME® Flow

Pentru umidificare când sunteți activ.

- A se combina ^{folosi împreună} cu Provox FreeHands FlexiVoice când vorbiți hands-free.

Provox FreeHands HME Flow	Cantitate	Nr. Ref.
Provox FreeHands HME Flow	30 buc	8221

Non-steril, de unică folosință.



Provox® FreeHands HME® Moist

Pentru umidificare suplimentară când vă relaxați.

- A se combina ^{folosi împreună} cu Provox FreeHands FlexiVoice când vorbiți hands-free.

Provox FreeHands HME Moist	Cantitate	Nr. Ref.
Provox FreeHands HME Moist	30 buc	8220

Non-steril, de unică folosință.



Provox® FreeHands FlexiVoice™ Arch

Pentru a împiedica ^{acoperirea dispozitivului} materialul să îngusteze FlexiVoice.

Provox FreeHands FlexiVoice Arch	Cantitate	Nr. Ref.
Provox FreeHands FlexiVoice Arch	5 buc	8165

Non-steril, a se utiliza de către un singur pacient.
Reutilizabil.



Provox® StabiliBase™

Oferă etanșare și suport superior pentru stomă atunci când vorbiți hands-free.

- Pentru a vorbi hands-free
- Pentru a vorbi intens și mult cu ocluzia degetului
- Se prinde bine de piele
- Pentru o stomă adâncă

Provox StabiliBase	Cantitate	Nr. Ref.
Provox StabiliBase	15 buc	7289
Provox StabiliBase OptiDerm	15 buc	7318

Non-steril. De unică folosință.



Provox® XtraBase®

Pentru a vorbi cu ocluzia degetului sau hands-free.

- Pentru a vorbi cu ocluzia degetului sau hands-free
- Pentru o stomă plată sau earecum mai adâncă
- Se prinde bine de piele

Provox XtraBase	Cantitate	Nr. Ref.
Provox XtraBase	20 buc	7265

Non-steril. De unică folosință.



Îngrijire




Bandă Adezivă™ Provox®

Oferă etanșare adezivă adițională. Protejează Provox Luna în timpul dușului.

Bandă adezivă Provox	Cantitate	Nr. Ref.
Bandă adezivă Provox	10 buc	8015

Non-steril, de unică folosință.

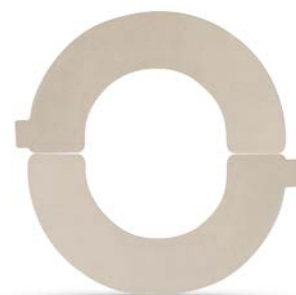

Capac Kit Duș Provox® Luna®

Protejează stoma de apă atunci când faceți duș ^{folosind adezivul} cu Provox Luna.

Capac Kit Duș Provox Luna	Cantitate	Nr. Ref.
Capac Kit Duș Provox Luna	1 buc	8016

Non-steril, a se utiliza de către un singur pacient.
Reutilizabil.



Servetele pentru îndepărtarea Produs de eliminare a adezivului Provox®

Pentru a ajuta la ^{îndepărtarea} ~~eliminarea~~ adezivului.

Servetele pentru îndepărtarea Produs de eliminare a adezivului Provox	Cantitate	Nr. Ref.
Servetele pentru îndepărtarea Produs de eliminare a adezivului Provox	50 buc	8012

Non-steril, de unică folosință.



Protecție Barieră Piele Provox®

Pentru a lăsa un strat de protecție pe piele.

Barieră piele Provox	Cantitate	Nr. Ref.
Barieră piele Provox	50 buc	8011

Non-steril, de unică folosință.



Servetele Prosop de Curățare Provox®

Pentru a curăța pielea înainte de a aplica un adeziv.

Servetele

Prosop de curățare Provox	Cantitate	Nr. Ref.
Servetele Prosop de curățare Provox	200 buc	7244

Non-steril, de unică folosință.
Pachetul (7244) conține 20 de pungi resigilabile cu 10 prosop servetele



Skin Tac™

adeziunea dispozitivelor
Îmbunătățește prinderea aparatelor și a benzilor de piele.

SkinTac	Cantitate	Nr. Ref.
Servetele de protecție Adezivă Skin Tac	50 buc	MS407W



Dispozitiv de indepartare

Set de curățare

dispozitivul
Pentru a elimina HME din valo de vorbire FlexiVoice.

Dispozitiv de indepartare

Set de curățare	Cantitate	Nr. Ref.
Dispozitiv de indepartare	2 buc	7745

Non steril, a se utiliza de către un singur pacient.
Refolosibil.



Lipici Silicon Provox®

Îmbunătățește prinderea dintre piele și adeziv.

Lipici Silicon Provox	Cantitate	Nr. Ref.
Lipici Silicon Provox	1 buc	7720

Non-steril, a se utiliza de către un singur pacient.
Pentru aplicații multiple,



Capac Set Duș Provox®

Protejează stoma de apă la duș.

Capac Set Duș Provox	Cantitate	Nr. Ref.
Capac Set Duș Provox	1 buc	7260

Non-steril, a se utiliza de către un singur pacient.
Include: 1 Adeziv Oval Provox FlexiDerm (7254)



Protector Provox®

Un protector gros, absorbant pentru utilizatorii cu o cantitate crescută de secreții. Oferă căldură în jurul gâtului și este ideală pentru utilizare în lunile mai reci.

- Absorbant și moale

Nume produs	Mărime	Culoare	Cantitate	Nr. Ref.
Protector Provox	Mică	Albă	10 buc	7385
Protector Provox	Mare	Albă	10 buc	7386

Non-steril, a se utiliza de către un singur pacient. Reutilizabil.
Spălarea mâinilor, nu mai mult de 3 ori.



Protector Aerian Provox® Air

Un protector ușor pentru stomă pentru utilizatorii cu secreții vâscoase lipicioase. Este realizat dintr-un material ușor de curățat, și prin care se poate respira ușor.

- Ușor de respirat prin el și ușor de curățat

Nume produs	Mărime	Culoare	Cantitate	Nr. Ref.
Protector Aerian Provox Air Mic	Mic	Albă	10 buc	7391
Protector Aerian Provox Air Mic	Mic	Albastră	10 buc	7392
Protector Aerian Provox Air Mare	Mare	Albă	10 buc	7393
Protector Aerian Provox Air Mare	Mare	Albastră	10 buc	7394

Non-steril, a se utiliza de către un singur pacient. Reutilizabil.
Spălarea mâinilor, nu mai mult de 3 ori.



Protector Provox® Slim

Un protector mai subțire pentru stomă pentru utilizatorii care nu au o cantitate mare de secreții. Este realizat dintr-un material prin care se poate respira ușor, cu greutate redusă și ideal pentru o vreme mai caldă.


- Ușor, moale și confortabil

Nume produs	Mărime	Culoare	Cantitate	Nr. Ref.
Protector Provox Slim	Mic	Albă	10 buc	7387
Protector Provox Slim	Mic	Albastră	10 buc	7388
Protector Provox Slim	Mare	Albă	10 buc	7389
Protector Provox Slim	Mare	Albastră	10 buc	7390


Non-steril, a se utiliza de către un singur pacient. Reutilizabil.
Spălarea mâinilor, nu mai mult de 3 ori.




Ilustrații Laringectomie

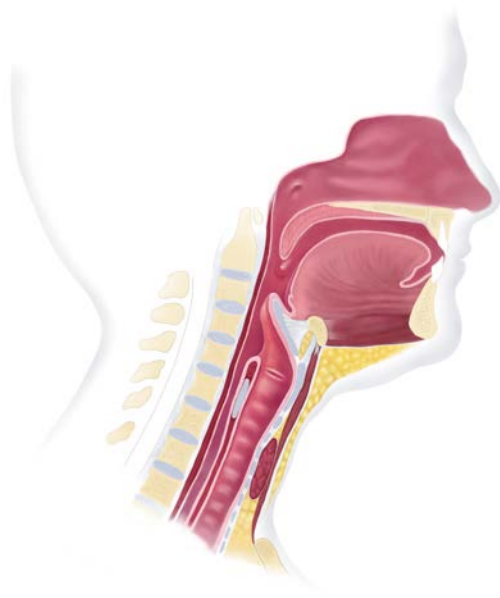


Înainte de laringectomie totală

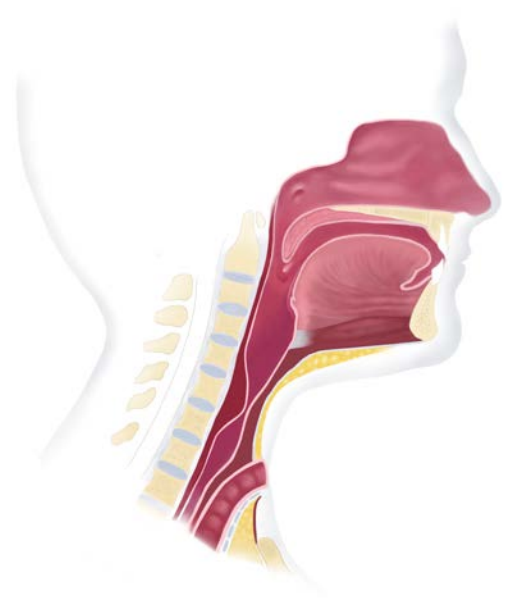

După laringectomie totală

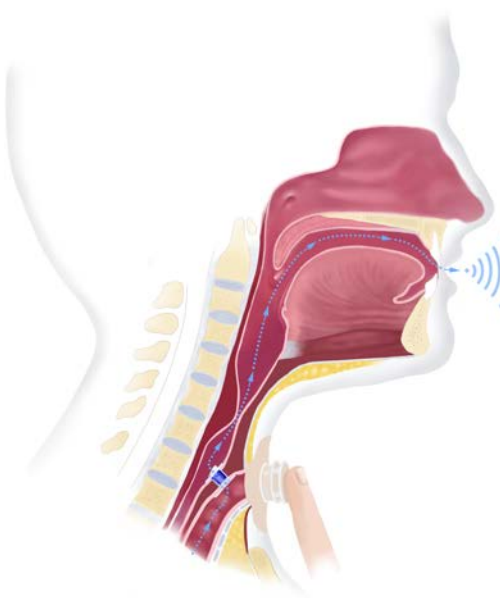

Vorbirea cu proteză de voce Provox:
Ocluzie manuală a Provox XtraHME atașată cu
Adeziv Provox.

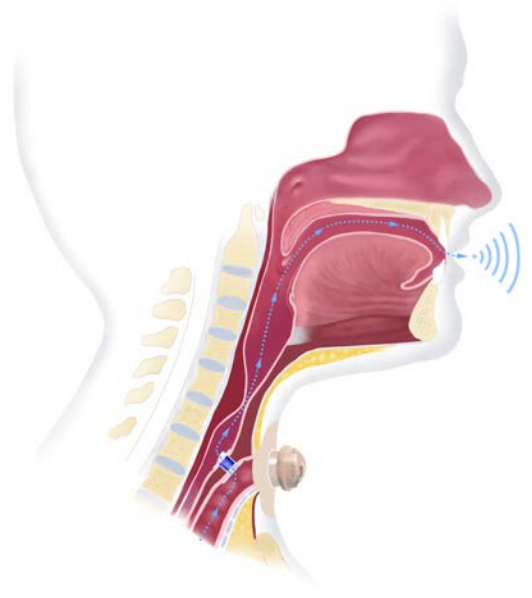

Vorbirea cu proteză de voce Provox:
Fără mâini cu Provox FreeHands FlexiVoice prins
cu Adeziv Provox.

Contact

Mai jos găsiți adresele noastre globale și informațiile noastre de contact. Găsiți-vă țara și contactați-ne. Suntem întotdeauna aici să vă ajutăm.

**Sediu & Producător:**

Atos Medical AB
Tel. +46 (0)415 198 00
info@atosmedical.com
www.atosmedical.com

Australia:

Atos Medical Pty Ltd
Tel. +61 1800 286 728
info.au@atosmedical.com
www.atosmedical.com.au

Belgia:

Atos Medical BVBA / SPRL
Tel. +32 (0)2 218 55 50
info.be@atosmedical.com
www.atosmedical.be

Brazilia:

Atos Medical Ltd
Tel. +55 11 2305 2022
info.br@atosmedical.com
www.atosmedical.com.br

Canada:

Atos Medical Canada Inc
Tel. +1 833 514 2867
info.ca@atosmedical.com
www.atosmedical.ca

Franța:

Atos Medical S.A.S.
Tel. +33 (0)1 49 08 01 00
info.fr@atosmedical.com
www.atosmedical.fr

Germania:

Atos Medical GmbH
Tel. +49 (0)800 53 53 667
info.de@atosmedical.com
www.atosmedical.de

Ungaria:

Atos Medical AB Magyarorszag
Tel. +36 70 377 2414
www.atosmedical.com

Italia:

Atos Medical Srl
Tel. +39 049 775 522
info.it@atosmedical.com
www.atosmedical.it

Japonia:

Atos Medical Japan Inc.
Tel. +81 (0)3 4589 2830
info.jp@atosmedical.com
www.atosmedical.jp

Olanda:

Atos Medical B.V.
Tel. +31 (0)79 593 5000
info.nl@atosmedical.com
www.atosmedical.nl

Noua Zeelandă:

Atos Medical Ltd
Tel. +64 (0)4 576 2100
info.nz@atosmedical.com
www.atosmedical.co.nz

Țările nordice:

Tel. +46 (0)415-19820
kundtjanst@atosmedical.com
www.atosmedical.com

Polonia:

Atos Medical Poland Sp. z o.o.
Tel. +48 22 295 00 16
biuro@atosmedical.com
www.atosmedical.com

Portugalia:

Atos Medical Spain S.L.
Sucursal em Portugal
Tel. +351 212 539 281
info.pt@atosmedical.com
www.atosmedical.pt

Spania:

Atos Medical Spain S.L.
Tel. +34 93 323 91 95
info.es@atosmedical.com
www.atosmedical.es

Elveția:

Atos Medical, Switzerland
Tel. +41 (0)44 380 60 90
info.ch@atosmedical.com
www.atosmedical.ch

Regatul Unit:

Atos Medical UK
Tel. +44 (0)115 784 1899
info.uk@atosmedical.com
www.atosmedical.co.uk

SUA:

Atos Medical Inc.
Tel. +1 800 217 0025
info.us@atosmedical.com
www.atosmedical.us



La Atos Medical, suntem ^{dedicati} ~~angajați~~ să
oferim o voce persoanelor care respiră
^{printr-o} ~~folosind o~~ stomă, cu soluții și tehnologii
^{proiectate} ~~de proiectare~~ construite în decenii de experiență
și înțelegere profundă a utilizatorilor noștri.

www.atosmedical.com

Distribuitor în România

Your Future Sounds



Str. Academiei, nr. 28-30, et. 9, sect. 1, București
~~Str. Nicolae Filipescu, Nr 39-41, Sector 2, București~~



0731.600.627

Sediu

Atos Medical AB, Hyllie Boulevard 17, SE-215 32 Malmö, Sweden

Producător:

Atos Medical AB, Kraftgatan 8, P.O. Box 183, SE-242 22 Hörby, Sweden

Tel: +46 (0)415 198 47

Email: info@atosmedical.com

Atenție: ~~destinat pentru distribuția doar~~
Acest catalog este ~~destinat distribuției~~ în afara SUA.

Atos

Atos Medical
Your voice